


PILOSET BIODROP PLUS

Preservative-free, sterile, moisturizing and lubricating eye drop
with 2.0% trehalose, 0.25% hyaluronan

| | | | |
|------------|----------|------------|-----------|
| Čeština | Español | Lietuvių | Português |
| Dansk | Français | Magyar | Русский |
| Deutsch | Íslenska | Nederlands | Suomi |
| Eesti keel | Italiano | Norsk | Svenska |
| English | Latviešu | Polski | عربی |

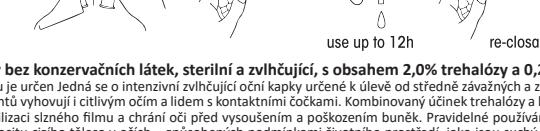

Čeština • Oční kapky bez konzervačních láték, sterilní a zvlhčující, s obsahem 2,0% trehalózy a 0,25% kyseliny hyaluronové

Popis přípravku a k čemu je určen Jedná se o intenzívni zvlhčující oční kapky určené k úlevě od středně závažných a závažných příznaků suchých očí. Oční kapky bez konzervantů využívají i citlivý oční a lidem s kontaktními čočkami. Kombinovaný účinek trehalózy a kyseliny hyaluronové poskytuje hydrataci, mazání a stabilizaci slizného filmu a chrání oči před vysoušením a poškozením buněk. Pravidelné používání ulevuje od příznaku suchých očí — svědění, plálení a pocitu čichu tělesa v očích — způsobených podmínkami životního prostředí, jakýsou vzhledem, větr, kouř, znečištění vzdachu, nadměrné světlo, průčaje u počítaců či zároku a používání kontaktních čoček. Intenzívni zvlhčující oční kapky jsou vhodné pro dlouhodobé a časté používání. Jedná se o zdravotnický prostředek vyvinutý a vyroběný v Finsku.

Návod k použití Aplikujte do očí 1–2 drábež 1–3krát denně, dle potřeby. Otevřete hliníkový obal, vyjměte jednu lahvičku z pásku a otevřete ji otočením a zatažením za víčko. Aplikujte 1 kapku do oka jemným stisknutím téla lahvičky. Lahvičku můžete znovu uzavřít (viz obrázky) a zbyvající produkt spotřebovat během 12 hodin. Zvlhčující kapky můžete použít během nošení kontaktních čoček.

Preventivní opatření a upozornění • Nepoužívejte, pokud jste citliví na kteroukoliv složku tohoto přípravku. • Nepoužívejte, pokud je ampulka poškozena. • Každá ampulka by měla použít pouze jeden uživatel. • Nedotýkejte se vrcholu ampule oči ani kontaktních čoček. Nedotýkejte se vrcholu ampule rukama. • Nepoužívejte po uplynutí datu spotřeby. • Bezprostředně po aplikaci mužte dojít k místu rozstretnému vidění. Je proto vhodné počkat několik vteřin, než budete pokračovat v činnosti, která vyžaduje ostré vidění. • Mezi aplikací jakéhokoliv jiného očního přípravku byste měli posčekat nejméně 10–15 minut. • Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. • Skladujte při teplotě 15–30 °C, chráněte před přímým slunečním zářením a mrázem. • Lahvičku zlikvidujte předepsaným způsobem. **Zložení** 2,0 % trehalose, 0,25 % kyselina hyaluronová ve stříbrném izotonickém roztoku nízkofosfátového pufuru. Neobsahuje žádné látky živočišného původu.

Dansk • Ukonserverede, sterile, fugtgivende og smørende øjendråber med 2,0% trehalose og 0,25% hyaluron

Hvad det er og hvad det kan bruges til Dette er en intensiv fugtgivende øjendråber, der er beregnet til at løse moderate og alvorlige symptomer på øre øjne. Disse øjendråber uden konserveringsmiddel egner sig også til følsomme øjne og kontaktlinser. Den kombinerede virkning af trehalose og hyaluronan giver hydrering, smøring og stabilisering af tårefilmene, der beskytter øjet mod udtrørring og celleskader. Regelmæssigt brug hindrer symptomer på øre øjne - kløe, brændende følelse og formennelse og formennelse af fremmedlegeme i øjnene - forsørges af miljømessige faktorer såsom tør luft, vind, regn, luftversmuntning, for meget lys, skyerarbejde eller okular kirurgi og brug af kontaktlinser. De intensiv fugtgivende øjendråber er velegnet til langvarig og hyppig anvendelse. Dette er en medicinsk enhed udviklet og fremstillet i Finland.

Instruktioner til bruk 1–2 dråber i øjnene 1–3 gange dagløst efter behov. Åbn aluminiumsækken, løs ampullen og åbn den ved at dreje og løfte hættet. Sæt dråbet i øjet ved at klempne ampullen let. Luk ampullen ved at dreje hættet på hovedet på ampullen (se billedet). Brug den åbne ampulinden for 12 timer. Du kan bruge fugtgivende dråber under brug af kontaktlinser.

Forholdsregler og advarsler • Må ikke anvendes ved overførsomhed over for en eller flere af ingredienserne. • Må ikke anvendes, hvis ampullen er beskadiget. • Hver ampull må kun anvendes af en enkelt bruger. • Ampullen spids må ikke komme i berøring med øjet eller kontaktlinser. Berør ikke ampulens spids med fingrene. • Må ikke anvendes efter udløbsdato. • Svag forbipående sløring af synet kan forekomme umiddelbart efter anvendelse. Det er derfor tilrådet at vente få sekunder før fortsættelse af enhver aktivitet, som kræver klart syn. • Vent mindst 10–15 minutter, før anvendelse af ethvert andet øjenpræparat. • Opbevares utgångsagtig for børn og uden for børns synsvide. • Opbevares ved 15–30 °C og beskyttet mod direkte sol og frost. • Den tomme ampullen skal bortskaffes hensigtsmæssigt. **Zammensætning** 2,0% trehalose, 0,25% kyselina hyaluronan i steril isotonisk lavfosfatbufferet oplysning. Indeholder ingen materialer af dyrskind oprindelse.

Deutsch • Konserverungsmittelfreie, sterile, benetzende und schützende Augentropfen mit 2,0% Trehalose und 0,25% Hyaluron

Worum es handelt sich und wofür es gedacht ist Dies ist ein intensiver Feuchtigkeitsspender, der moderate und schwerwiegende Symptome trockener Augen lindert. Diese Augentropfen sind frei von Konserverungsmitteln und damit auch für empfindliche Hauttypen und Kontaktlinsenträger geeignet. Das Zusammenwirken von Trehalose und Hyaluronsäure wirkt feuchtigkeitsspendend und wasserbindend, stabilisiert den Tränenfilm und schützt das Auge vor dem Austrocknen sowie vor Zellschädigung. Eine regelmäßige Anwendung lindert die Symptome, die bei trockenen Augen auftreten – Jucken, Brennen und das Gefühl fremder Objekte im Auge – die von Bedingungen in Ihrem Umfeld wie trockene Luft, Wind, Rauch, Luftsverschmutzung, intensive Lichteneinstrahlung, Arbeit am Bildschirm, aber auch Operationen am Auge und Kontaktlinsen verursacht werden können. Die intensiven feuchtigkeitsspendenden Augentropfen eignen sich für häufige Anwendung über lange Zeiträume. Dies ist ein medizinisches Gerät, entwickelt und hergestellt in Finnland.

Gebräuchsanweisung Tragen Sie nach Bedarf 1 bis 2 Tropfen auf die Augen auf. Die Aluminium Verpackung öffnen und ein Fläschchen von der Reihe trennen. Die Verschlusskappe oben durch drehen und ziehen öffnen. Das Fläschchen Überkopf leicht pressen und 1 Tropfen in das Auge ein tropfen. Das geöffnete Fläschchen ist wieder verschließbar (Siehe Bilder). Der Inhalt eines geöffneten Fläschchens kann während 12 Stunden angewendet werden. Sie können feuchtigkeitsspendende Tropfen auch anwenden, während Sie Kontaktlinsen tragen.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen • Nicht anwenden wenn Sie allergisch gegen eine der Inhaltsstoffe sind. • Ein beschädigtes Fläschchen nicht anwenden. • Jedes Fläschchen soll nur von einer Person verwendet werden. • Die Spitze des Fläschchens nicht mit dem Auge oder mit den Kontaktlinsen in Kontakt bringen um Verschmutzungen zu vermeiden. Die Spitze des Fläschchens nicht mit den Fingern berühren. • Der Inhalt bis zu dem Verfallsdatum verwenden. • Unmittelbar nach der Anwendung kann die Sicht leicht verschwommen sein. Es wird daher empfohlen, vor der Wiederaufnahme von Aktivitäten, die klare Sicht erfordern, einige Sekunden zu warten. • Bei zusätzlicher Anwendung anderer Augenmedikamente sollte zwischen den Anwendungen der unterschiedlichen Medikamente ein Zeitraum von 10–15 Minuten liegen. • Arbeite nicht an die Hände von Kindern gelangen. • Bei 15–30 °C lagern, 0,25% Hyaluron in steriler isotonischer, niedrig-phosphat-gepufferten Lösung. Enthält keine Produkte tierischen Ursprungs.

Eesti keel • Säilitusaineteta, steriilis ja niisutavad silmatiigad, mis sisaldavad 2,0% trehalose ja 0,25% hüaluronani

Mis see ja mille jaoks see on mööeldud See on intensiivne niisutaja, mis on mööeldud mõõdukate ja raskete kuiva silma sümptomite leevandamiseks. Säilitusaineteta silmatiig sobib ka tundlike silmade ja kontaktläätsede kasutajatele. Trehalose ja hüaluronani ühised määritused ja niisutust siduvad omadused tasakaalustavat pisaravedeliku loomulikuks koostist ja kaitsevad silma kuivamise ja rakkushastustest eest. Regularne kasutamine leevendab kuiva silma sümptomide (sügelust, kipust, vähemalt tunnet silmades), mida põhjustavad keskkonnaelementid nagu kuiv õhk, tuul, õhusaaste, liigne valgus, töö arvutiga või silmikirurgia ja kontaktläätsede kasutamine. Intensiivselt niisutav silmatiig sobib pikajaliseks ja sagestaseks kasutamiseks. See on meditsiiniseade, mis on töötatud välja ja valmistatud Soomes.

Kasutusjuhend Tilgutage silma 1–2 tilka, 1–3 korda päevas (vajaduse kohaselt). Avage aluminiumpakk, vabastage ampull ja avage see, keerates ja tõstes korki. Pange silma tilk, kergelt ampulli pistaged. Sulgege ampull, keerates kapslit ampulli tagurpidi (vt pilte). Avatud ampulli kasutamine 12 tunni jooksul. Niisutavat tilik võib kasutada kontaktläätsede kasutamise ajal.

Ettevaatustabinud ja hoitused • Ärge kasutage tooted, kui olete mõne soole koolitusist. • Ärge kasutage, kui ampull on kahjustatud ja saanud. • Igal ampulli peaks olema vaid üks kasutaja. • Arge puudutage ampulli otsaga silma või kontaktläätsesse. Arge puudutage ampulli otsa sörmedega. • Ärge kasutage tooted pärast selle kõlblikkusaja lõppu. • Nõagemine võib vahetult pärast silmatihkade tilgutamist lühiajaliselt hulgastuda. Seetõttu soovitame teil enne selget nägemist eelnevate testimustest välja kättemaks. • Arge kasutage tooted pärast selle kõlblikkusaja lõppu. • Nõagemine võib vahetult pärast silmatihkade tilgutamist lühiajaliselt hulgastuda.

• Odake enne mõne päeva silmapreparaadi kasutamist vähemalt 10–15 minutit. • Hoidake tooted temperatuuril 15–30 °C ning kaitse seda otsest päävevalguse ja jäätumise eest. • Kõrvalevage tühjana puduud. • Hoidake lastele kättesaamatus kohas. **Koostis** Steriilne isotooniline, madala fosfaatpuhvi sisaldusega lahus, mis sisaldab 2,0% trehalose ja 0,25% hüaluronani. Loomsed koostisosad puuduvad.

English • Preservative-free, sterile, moisturizing and lubricating eye drop with 2.0% trehalose and 0.25% hyaluron

What it is and what it is intended to This is an intensive moisturizing eye drop intended to relieve moderate and severe dry eye symptoms. The preservative free eye drops suit also sensitive eyes and contact lens users. The combined action of trehalose and hyaluronan provide hydration, lubrication and stabilization of the tear film, protecting the eye from drying and cell damage. Regular use relieves dry eye symptoms — itching, burning and foreign body sensation in the eyes — caused by environmental factors such as dry air, wind, smoke, air pollution, excessive light, visual display work or ocular surgery and contact lens use. The intensive moisturizing eye drops suit long-term and frequent use. This is a medical device developed and manufactured in Finland.

InSTRUCTIONS FOR USE Apply 1–2 drops in the eyes 1–3 times daily, as needed. Open the aluminium bag, take off one vial from the strip and open it by turning and pulling the cap. Put one drop in the eye by squeezing gently the body of the vial. The vial can be reclosed (see pictures) and the remaining product used up in 12 hours. You can use moisturizing drops during contact lens wear.

Precautions and warnings • Do not use if you are sensitive to any of the ingredients. • Do not use if the vial is damaged. • Each vial should be used by one user only. • Do not touch the eye or contact lens with the tip of the vial. Do not touch the tip of the vial with fingers. • Do not use after the expiry date. • Mild temporary blurring of vision may be experienced immediately after application. It is therefore advisable to wait a few seconds before continuing any activity that requires clear vision. • Leave at least 10–15 minutes between applications of any other ophthalmic preparation.

• Keep out of the reach and sight of children. • Store at 15–30 °C, protect from direct sunshine and freezing. • Discard the empty vial appropriately.

Composition 2.0% trehalose, 0.25% hyaluronan in sterile isotonic, low-phosphate-buffered solution. No materials of animal origin.

Español • Colirio lubricante hidratante, estéril y sin conservantes con 2,0% de trehalosa y 0,25% de hidaluronano

Qué es y para qué se utiliza Este colirio es un humectante intensivo diseñado para aliviar los síntomas moderados y graves derivados de la sequedad ocular. El colirio no contiene conservante y también resulta adecuado para personas con ojos sensibles y personas que utilizan lentes de contacto. La acción combinada de la trehalosa y el ácido hialurónico proporciona hidratación, lubricación y estabilización de la película lagrimal a fin de proteger el ojo de la sequedad y los daños celulares. Su uso regular alivia los síntomas derivados de la sequedad ocular, como el picor, la quemazón y la sensación de cuerpo extraño en el ojo, que son provocados por elementos ambientales tales como el aire seco, el viento, la contaminación ambiental, la iluminación excesiva, el trabajo con pantallas de visualización de datos, la cirugía ocular y el uso de lentes de contacto. Este colirio humectante intensivo es adecuado para un uso prolongado y frecuente. Se trata de un producto sanitario desarrollado y fabricado en Finlandia.

INSTRUCCIONES DE USO Dependiendo de sus necesidades, aplique 1 o 2 gotas en los ojos de 1 a 3 veces al día. Abra la bolsa de aluminio, saque un vial de la tira y ábralo girando y tirando de la tapa. Eche una gota en el interior del ojo apretando suavemente el cuerpo del vial. El vial se puede volver a cerrar (vea las imágenes) y el producto restante se puede utilizar durante las próximas 12 horas. Puede utilizar el colirio humectante mientras lleva puestas las lentes de contacto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS • No lo use si es sensible a cualquiera de los ingredientes. • No lo use si el vial está dañado. • Cada vial debe utilizarlo una única persona. • No toque el ojo ni las lentes de contacto con la punta del vial. No toque la punta del vial con los dedos. • No utilizar después de la fecha de caducidad. • Se puede experimentar una visión borrosa temporal leve inmediatamente después de aplicarlo. Por tanto, es aconsejable esperar unos segundos antes de continuar con cualquier actividad que requiera visión clara. • Deje por los menos 10-15 minutos entre las aplicaciones de cualquier otra preparación oftálmica. • Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. • Conservar a 15-30 °C protegido de la luz directa del sol y de la congelación. • Deseche el vial vacío de forma adecuada. **COMPOSICIÓN** Trehalosa 2,0 % y ácido hialurónico 0,25 % en solución salina isotónica, taponada, baja en fosfatos, estéril. No contiene productos de origen animal.

Français • Gouttes ophtalmiques hydratantes et lubrifiantes, stériles et sans conservateur avec trehalose à 2,0 % et acide hyaluronique à 0,25 % Qu'est-ce que c'est et à quoi il est destiné Il s'agit d'un collyre hydratant intensif destiné à soulager les symptômes modérés et sévères de sécheresse oculaire. Les gouttes ophtalmiques sans conservateur conviennent également aux yeux sensibles et aux utilisateurs de lentilles de contact. L'action combinée du trehalose et d'acide hyaluronique assure l'hydratation, la lubrification et la stabilisation du film lacrymal, protégeant ainsi l'œil contre le dessèchement et les dommages cellulaires. L'utilisation régulière soulage les symptômes de sécheresse oculaire - démeigeances, brûlures et sensations de corps étranger dans les yeux - causés par des facteurs environnementaux tels que l'air sec, le vent, la fumée, la pollution de l'air, la lumière excessive, le travail visuel d'affichage ou la chirurgie oculaire et l'utilisation des lentilles de contact. Les gouttes hydratantes intensives pour les yeux conviennent à une utilisation fréquente et prolongée. Il s'agit d'un dispositif médical développé et fabriqué en Finlande.

Mode d'emploi Appliquer 1 à 2 gouttes 1 à 3 fois par jour dans les yeux selon les besoins. Ouvrir le sac en aluminium, desserrer l'ampoule et ouvrir-la en tournant et soulevant le bouchon. Mettre la goutte dans l'œil en pressant légèrement l'ampoule. Fermer l'ampoule en retournant le capuchon sur l'ampoule (voir illustrations). Utiliser l'ampoule ouverte dans les 12 heures.Vous pouvez utiliser des gouttes hydratantes lorsque vous portez des lentilles de contact.

Précautions et avertissements • Ne pas utiliser en cas de sensibilité à l'un des ingrédients. • Ne pas utiliser si l'ampoule est endommagée. • Chaque l'ampoule doit être réservée à seul un utilisateur. • Ne pas toucher l'œil ou la lentille de contact avec l'embout de l'ampoule. Ne pas toucher l'embout de l'ampoule avec les doigts. • Ne pas utiliser après la date d'expiration. • De légers troubles temporaires de la vision peuvent survenir immédiatement après l'application. Il est donc recommandé d'attendre quelques secondes avant de poursuivre toute activité exigeant une vision claire.

• Attendre au moins 10–15 minutes avant d'appliquer toute autre préparation ophthalmique. • Conserver hors de la portée et de la vue des enfants.

• Conserver à 15–30 °C, à l'abri des rayons directs du soleil et du gel. • Jeter l'ampoule vide de manière appropriée.

Composition 2,0 % de trehalose, 0,25 % d'acide hyaluronique dans une solution isotonique stérile tamponnée à faible teneur en phosphate. Aucun composant d'origine animale.

Íslenska • Sæfðir augndropar, án rotvarnarefna, rakagefandi og smyrjandi sem innihalda 2,0% trehalose og 0,25% hyalúronán

Hvað betta er og hvils þær er ætlað. Þetta eru augnadröpar sem eru seðhannaðir til þess að nota gegn miðlungs- og afar mikum augnþurkki. Augnadröparinn innihalda ekki rotvarnarefni og hent vel heita viðkvæm augu og/éða nota augnlinurs. Samanlagt eiginleikar trehalósa og hyalúronán efnanna koma jafnvægi á tárkvölk, smyrja augunog verja þau fyrir þurrki og frumuskenndum. Reguleg notkun dregur úr augnþurkki þ.s.s. kláða, bruna og berfili tilfinningu að skófum sem krefjast skýrará sjónar. • Bíldið í minn 10–15 minútum áður en einhver ðýrnfugl eru notuð. • Geymni þar sem børn hvorki na til né sjá. • Geymst við 15–30 °C, haldíð frá þeim solarljósi og frosti. • Farið tóumum umbúðum með viðeigandi hætti. **Innhaldselfi** 2,0% trehalose, 0,25% hyalúronán í sæfðri, ísótínskri, milt fosfatfáraðri lausn. Inniheldur engar notkunarleiðbeiningar.

Setjið 1–2 droppa í augun, 1–3 sinnus á dag, allt eftir þörfum. Opnið álpokann, takið eina lykju af lengjuni og opnið lykjunu með því að snúa upp á tappann og toga honum af. Setjið 1–2 droppa í auguð með því að það bolk lykjunar varlega. Hægt er að loka lykjunni aftur (sjá myndir) og nota það sem einfir er af augnþurkni. • Notið ekki er af augnþurkni er skemmt.

• Hvert hettuglas skal áeins nota ef einum notanda. • Snerti ekki augað eða snertilinsins með enda stútsins. Snerti ekki stútin með fingrum.

• Notið dropana ekki eftir fyrirnigardættingun. • Hugsanlegt er að sjón verfið eftir óský fyrst eftir að dropanir eru settir í. Það er því ráðlegt að bíða átektá i nokkrar sekundur, en haldíð er áfram einhverjum aðgerðum sem krefjast skýrará sjónar. • Bíldið í minn 10–15 minútum áður en einhver ðýrnfugl eru notuð. • Geymni þar sem børn hvorki na til né sjá. • Geymst við 15–30 °C, haldíð frá þeim solarljósi og frosti. • Farið tóumum umbúðum með viðeigandi hætti. **Innhaldselfi** 2,0% trehalose, 0,25% hyalúronán í sæfðri, ísótínskri, milt fosfatfáraðri lausn. Inniheldur engar notkunarleiðbeiningar.

Italiano • Collirio sterile, priva di conservanti, ad effetto idratante e lubrificante, contenente trehalosio allo 2,0% e acido

hyaluronico al 0,25% Che cos'è e a cosa è destinato Si tratta di un collirio idratante per alleviare i sintomi gravi e moderati di occhi secchi. Il collirio senza conservanti è adatto anche agli occhi sensibili e per coloro che indossano lenti a contatto. L'azione combinata di trehalosio e acido hyaluronico fornisce idratazione, lubrificazione e stabilizzazione del film lacrimale, proteggendo l'occhio dall'essiccazione e da danni cellulari. L'uso regolare allevia i sintomi degli occhi secchi - prurito, bruciore e sensazioni di corpi estranei - negli occhi - causati da fattori ambientali quali aria secca, vento, fumo, inquinamento atmosferico, luce eccessiva, ecc. È un dispositivo medico sviluppato e prodotto in Finlandia.

Istruzioni per l'uso Applicare 1–2 gocce negli occhi 1–3 volte al giorno, secondo necessità. Aprire la busta di alluminio, togliere il flaconcino. Il flaconcino può essere richiuso (vedere le immagini) e il prodotto rimanente consumato in 12 ore. È possibile utilizzare le gocce idratanti mentre si indossano lenti a contatto.

Precauzioni e avvertenze • Non usare se si è sensibili a uno degli ingredienti. • Non utilizzare se il flaconcino risultasse danneggiato. • Il flaconcino deve essere utilizzato da un'unica persona. • Non toccare l'occhio o le lenti a contatto con la punta del flaconcino. Non tenere la punta del flaconcino con le dita. • Non utilizzare dopo la data di scadenza. • Un leggero offuscamento temporaneo della vista può verificarsi subito dopo l'applicazione. È quindi consigliabile attendere alcuni secondi prima di continuare qualsiasi attività che richieda una visione chiara. • Far trascorrere almeno 10–15 minuti tra le applicazioni di qualsiasi altro preparato oftalmico. • Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. • Conservare a 15–30 °C, proteggere dalla luce diretta del sole e dal gelo. • Smaltire il flaconcino vuoto in modo appropriato.

Composizione 2,0% trehalose, 0,25% acido hyaluronico in soluzione sterile isotonica, taponata a basso fosfato. Nessun materiale di origine animale.

Latviešu • Sterili acu pilieni bez konservantiem ar mitrinošu iedarbību, 2,0% trehalose un 0,25% hidaluronāns

Kas šis ir un kādām nolūkām tas ir paredzēts? Šis izstrādājums ir intensivs mitrinošs līdzeklis, ko paredzēts lieto, lai novērstu mērenu un ieteiktu sausuma sājutu acīs. Sie acu pilieni nesatur konservanti. Līdzeklis var lietot arī jutīgumā acīm un kontaktlēcām. Trehalozes un hidaluronāna kombinātē darbība nodrošina asaru plēves hidratāciju, mitrīšanu un stabilizāciju, aizsargājot acis no zūšanas un ūnu bojājumiem. Regulāri lietojiet, tiek novērsta sausuma sājuta acīs, kairinājums, dedzināšanas sājuta, skjētāmības sājuta, ka acī iekļuvis svešķermenis, ko rada vides apstākļi, piemēram,

Last revision: September 2018 674-1 02/2019

STERILE A +30 °C CE 0537

YITESTYSSÄ OY JÄRJESTÄVÄ ASTHMAUTONIKA KAISA IN CO-OPERATION WITH THE WORLD ASTHMA FEDERATION

Oy Finnsup Ab Pääskykalliointie 5 FI-21420 Lieto, Finland www.piloset.fi

